




## Veinlite EMS-Pro® Damar Görüntüleme Cihazı



*Başarısı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış tek damar görüntüleme cihazı..!*

Veinlite EMS-Pro® kullanımı kolay ve başarısı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış tek damar görüntüleme cihazıdır. Daha geniş yüzeyi görebilmenizi sağlayan yeni "C" şekilli yapısı ve parlak led ışıkları, en zor hastalarda bile damarı kolayca bulmanıza ve giriş sırasında damarı sabitlemenize yardımcı olur.

- Klinik olarak kanıtlanmış Veinlite® teknolojisi...
- INS ve CDC Enfeksiyon Kontrol Protokolleri'ne uygundur.
- Yetişkin hastalara özeltasarlanmıştır.
- FDA ve CE standartlarına uygundur.

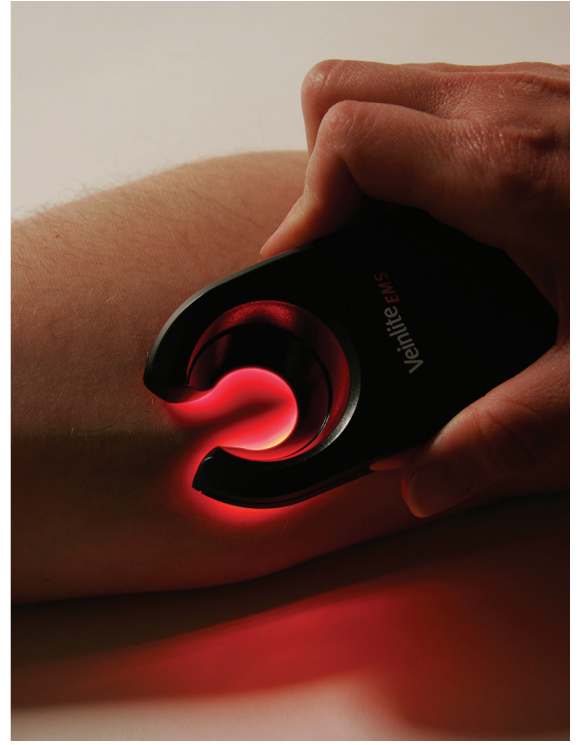

**Maliyetlerin Azalmasına Yardımcı Olur;** Yanlış damar girişlerinden kaynaklanan malzeme israfını azalttığı ve işlem süresini kısaltarak personelin iş yükünü kolaylaştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

**Hasta Memnuniyetini Olumlu Etkiler;** Damar Girişi hastalar için her zaman stresli bir süreçtir. Yanlış damar girişlerinin azalması süreci kısaltarak hasta memnuniyetini olumlu etkileyecektir.

**Enfeksiyon Taşıma Riski Yoktur;** Veinlite® ürünleri hasta cildine temas ederek çalışır. Ancak her kullanımda değiştirilen kılıflar sayesinde hastadan hastaya enfeksiyon taşıma riski yoktur. Ayrıca yaygın kullanımı olan dezenfektanlarla silinerek temizlenebilir.

**Kullanımı Pratik ve Kolaydır;** Veinlite® damar görüntüleme cihazlarının kullanımı son derece kolaydır. Tek bir kişi tarafından rahatlıkla her hasta tipinde kullanılabilir. Kullanımı için ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Her hangi bir yüzeye veya taşıyıcı ayağa sabitlenmesi gerekmez. Çalışma esnasında her hangi bir ışın yaymadığı için uzun kullanımlardan kaynaklanan göz yorulmalarına sebep olmaz.



|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Led Sayısı</i>      | 24 adt   |
| <i>Led Renkleri</i>    | 12 turuncu, 4 kırmızı ve 8 beyaz                     |
| <i>Renk Seçebilme</i>  | Turuncu + Kırmızı veya sadece Beyaz Işık Seçilebilir |
| <i>Halka Çapı</i>      | 21 mm  |
| <i>Batarya Tipi</i>    | 2 x AA Alkali Batarya                                |
| <i>Kullanım Süresi</i> | 550 dk   |
| <i>Ölçüler</i>         | 115 x 55 x 21 mm                                     |
| <i>Ağırlık</i>         | 108 gr, piller dahil                                 |